



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF BLISS FEET



Массажер для ног

**Актуальная версия
инструкции**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Устройство массажера	9
4. Управление и функции массажера	10
5. Распаковка	12
6. Подготовка к эксплуатации	12
7. Устранение неисправностей	13
8. Спецификация	14

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного массажера. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- не используйте во время купания или душа;
- не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду. немедленно отключите его;
- на массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- следите, чтобы шнур питания не заземлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- при хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг устройства;
- если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;
- отключайте массажер от электросети во время грозы;

- не накрывайте устройство во время его работы;
- не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не используется.
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем.
- Массажер предназначен для взрослых.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера.
- Массажер не предназначен для лечения, так как не является медицинским прибором.
- Не используйте массажер, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствуете себя плохо.
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа, чтобы успокоить уставшие и ноющие мышцы. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваше недомогание не проходит или ухудшается после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта массажа или травме.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не используйте это устройство более 20 минут подряд.
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями.
- Это устройство никогда не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим заболеванием, которое может ограничить способность пользователя управлять массажером.
- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Для того, чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер.
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли.
- Не используйте на улице.
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть.
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство.
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте.
- После использования вытирайте пыль и грязь с массажера сухой мягкой тканью.
- Тканевую вставку для ног можно вытащить. Для нее подходит только ручная стирка: не стирайте и не отжимайте в стиральной машине, не сушите в сушильной машине!

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для ног	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

3. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Секция для ног с моющейся тканью
2. Консоль управления
3. Корпус
4. Ножки



Рисунок 1 – Устройство массажера

4. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

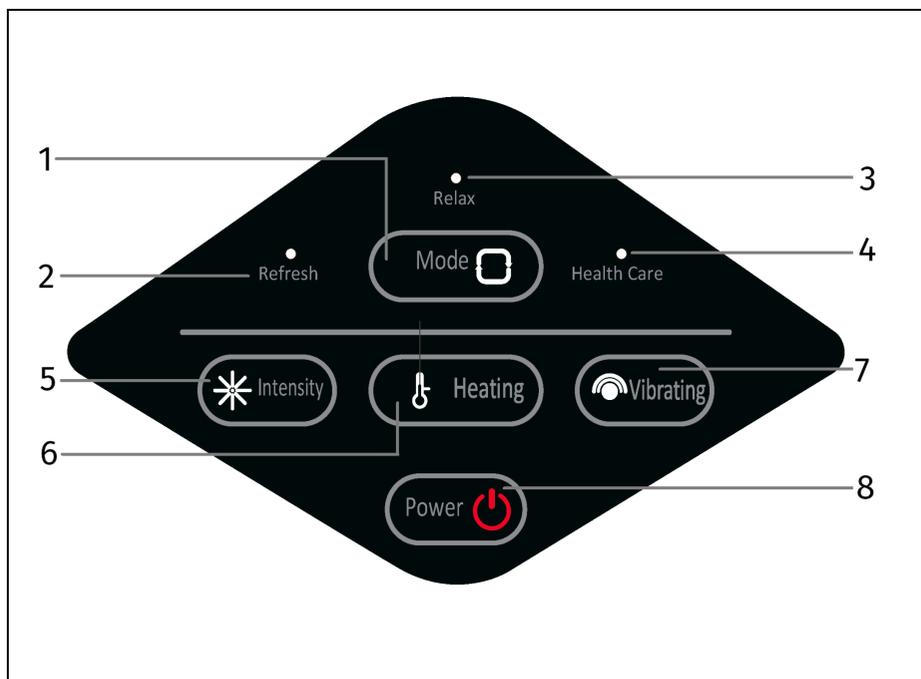


Рисунок 2 — Консоль массажера

1. Mode (Режим)

Кнопка запускает одну из трех автоматических программ. Выбранная программа будет подсвечена индикатором.

2. Refresh (Обновление)

Запускает воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж. Роликовый массаж работает в прерывистом режиме (с паузами).

3. Relax (Расслабление)

Запускает только воздушно-компрессионный и вибрационный массаж.

4. Health Care (Здоровье)

Запускает воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж. Роликовый массаж работает в постоянном режиме.

5. Intensity (Интенсивность)

Кнопка изменения мощности воздушно-компрессионного массажа. Каждое нажатие переключает мощность в следующей последовательности:

- **слабая мощность** - индикатор мигает медленно;
- **средняя мощность** - индикатор мигает часто;
- **высокая мощность** - индикатор горит постоянно.

6. Heating (Прогрев)

Кнопка управления прогревом. Нажмите для включения прогрева, повторное нажатие отключит прогрев.

7. Vibrating (Вибрация)

Кнопка управления режимом вибрационного массажа. Каждое нажатие на кнопку активирует вибрационный массаж в следующей последовательности:

- **постоянная вибрация** - индикатор горит постоянно;
- **рандомная вибрация** - индикатор мигает часто;
- **прерывистая вибрация** - индикатор мигает медленно.

8. Power (Вкл/Выкл)

Кнопка включения и выключения массажера. Нажмите для включения массажера, после нажатия загорится индикатор. Массаж начнется после выбора одного из режимов (Mode). Повторно нажмите для выключения массажера. Индикатор будет мигать, функции массажера останутся.

5. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Достаньте массажер из коробки.
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Разместите массажер на полу.
- Соедините кабель питания с адаптером. Раздастся характерный щелчок.
- Вставьте вилку адаптера в розетку (АС 220В, 50 Гц).
- Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения устройства.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Если у вас возникли проблемы, не упомянутые в списке, попробуйте выполнить следующие действия:

- выключите питание массажера и выньте вилку шнура питания из розетки;
- держите массажер отключенным от сети в течение 60 минут;
- вставьте вилку шнура питания в настенную розетку и включите питание.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не реагирует на нажатия кнопок.	Кабель питания не подключен.	Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.
	Не нажата кнопка питания.	Нажмите кнопку включения.
Массажер внезапно перестал работать в процессе массажа.	Отсутствует питание.	Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.
	Было выполнено несколько циклов по 15 минут.	Дайте прибору остыть в течение 15 минут. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
	Массажер только что завершил работу (прошло 15 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	Дайте прибору остыть в течение 15 минут. Нажмите кнопку включения.
	Массажер перегружен.	Расслабьте стопы, не давите на массажер.
Звук.	Шум роликов, воздушно-компрессионных подушек и моторов во время работы является нормальным явлением.	

8. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Виды массажа	Лимфодренажный, вибрационный, аэромассаж, расслабляющий, роликовый, разминание
Механизм массажа	Роликовый, вибрационный, воздушно-компрессионный
Автопрограммы, шт	3
Кол-во роликов, шт.	Роликовый массажный механизм на платформе и отдельные массажные барабаны
Кол-во воздушных подушек, шт	12
Прогрев	Да
Вибромассаж	Да
Пульт ДУ	Нет
Таймер	15 минут
Bluetooth	Нет
Размер (ДхШхВ), см	40х37х25
Вес нетто, кг	6
Вес брутто, кг	7
Размер упаковки, см	46х43х30
Напряжение питания	220В/12В 4А
Мощность, Вт	48

Производитель	Orlauf
Поставщик/Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабиловская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orkauf.com

Сайт производителя <https://orkauf.com>



