



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF RELIEF



Универсальный
массажер
с аккумулятором

**Актуальная версия
инструкции**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Устройство массажера для шеи и плеч	9
4. Управление и функции массажера	10
4.1 Кнопки управления	10
5. Световая индикация	11
5.1 Световая индикация во время зарядки устройства	11
5.2 Световая индикация при низком уровне заряда	11
6. Варианты использования массажера	12
7. Распаковка	13
8. Зарядка массажера	13
9. Правила эксплуатации аккумулятора	14
10. Устранение неисправностей	15
11. Спецификация	16

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- не используйте во время купания или душа;
- не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду. немедленно отключите его;
- на массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических застёжек;
- тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- следите, чтобы шнур питания не защемлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- при хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг устройства;
- если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;

- отключайте массажер от электросети во время грозы;
- не накрывайте устройство во время его работы;
- не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для профессионального лечения.
- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не используется.
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем.
- Массажер предназначен для взрослых.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера.
- Массажер не предназначен для лечения, так как не является медицинским прибором.
- Не используйте продукт, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствуете себя плохо.
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа, чтобы успокоить уставшие и ноющие мышцы. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваше недомогание не проходит или ухудшается после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта массажа или травме.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не используйте это устройство более 20 минут подряд.
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями. Не используйте при наличии не диагностированной боли в спине.
- Это устройство никогда не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим заболеванием, которое может ограничить способность пользователя управлять массажером.

- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Для того, чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер.
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли.
- Не используйте на улице.
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть.
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство.
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте.
- Тканевый чехол съемный. Для него подходит только ручная стирка: не стирайте и не отжимайте в стиральной машине, не сушите в сушильной машине!

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер	1 шт.
Зарядный кабель Type-C	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

3. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ

1. Панель управления
2. Массажные манипуляторы
3. Регулируемый ремень
4. Кнопка режим
5. Кнопка питания
6. Кнопка прогрева
7. Зарядный кабель Type-C

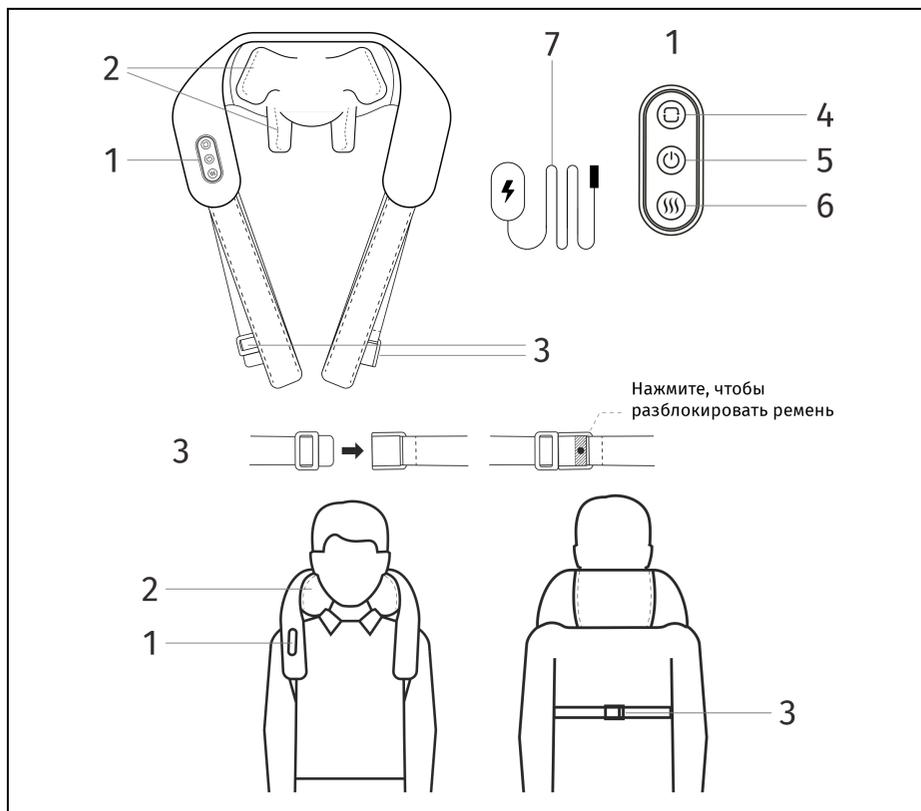


Рисунок 1 — Устройство массажера для шеи и плеч

4. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

4.1 Кнопки управления

Кнопка режим

Кнопка переключения режимов работы массажных манипуляторов. При переключении режима массажные манипуляторы прерывают массаж на 1 секунду.



В массажере предусмотрено 2 режима работы:

- **Непрерывный режим** - массажные манипуляторы работают в непрерывном режиме;
- **Прерывистый режим** - массажные манипуляторы работают с паузой в движении.

Кнопка питания



Для включения массажера нажмите и удерживайте кнопку питания. Для выключения — также нажмите и удерживайте кнопку питания.

После включения массажера массажные манипуляторы по умолчанию переходят в непрерывный режим работы, функция прогрева выключена.

Кнопка прогрева



В массажере предусмотрено 2 режима прогрева. По умолчанию функция прогрева выключена.

- Первое нажатие кнопки — прогрев до 45°С.
- Второе нажатие — прогрев до 50°С.
- Третье нажатие — отключение функции.

5. СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

5.1 Световая индикация во время зарядки устройства

- Красный индикатор горит непрерывно во время зарядки.
- Зеленый индикатор загорается, когда устройство полностью заряжено.

5.2 Световая индикация при низком уровне заряда

При низком уровне заряда (напряжении 7В) красный индикатор мигает примерно 3 раза в секунду. Это значит, что массажер необходимо зарядить.



Внимание! При низком уровне заряда (напряжении 6,5 В) массажер автоматически отключается.

6. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА

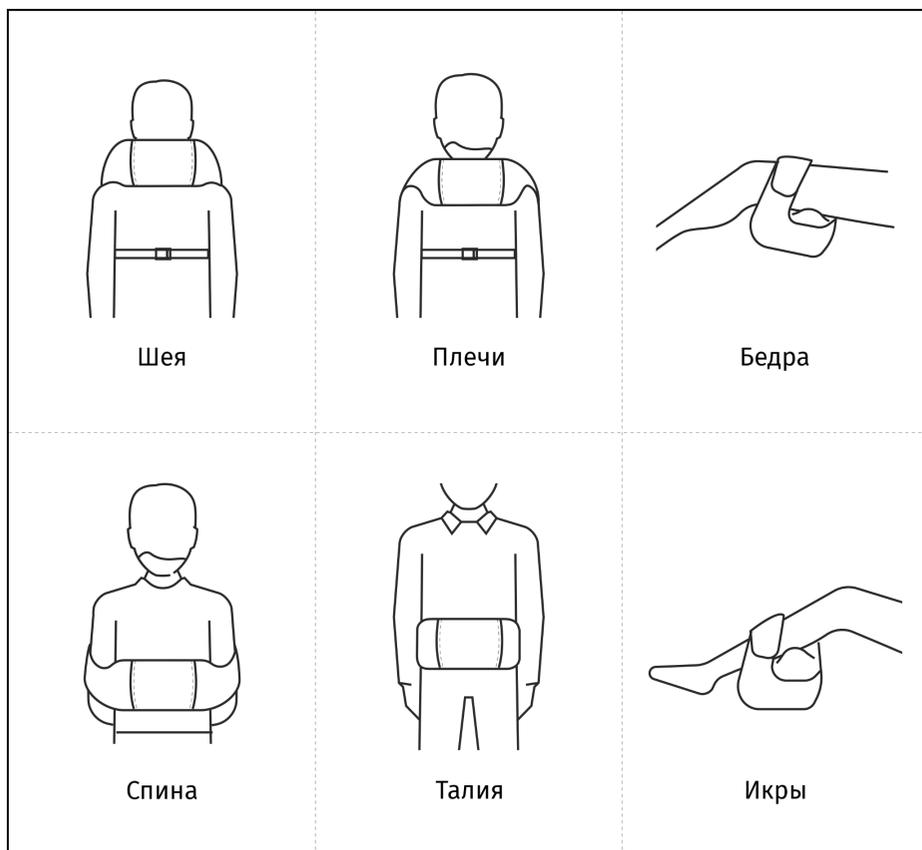


Рисунок 2 — Способы использования массажера



Примечание. *Время работы по умолчанию составляет 15 минут.*

7. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Достаньте массажер из коробки.
- Полностью зарядите массажер перед первым применением, как указано в инструкции ниже.
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

8. ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

Перед первым использованием полностью зарядите массажер.

- Подключите зарядку типа Type-C из комплекта.
- Светодиодный индикатор зарядки загорится красным.
- Светодиодный индикатор зарядки станет зеленым, когда массажер будет полностью заряжен.
- Приблизительное время зарядки составляет 3,5-4 часа.

9. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Массажер содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо переработать или утилизировать надлежащим образом. Обратитесь в местное управление по утилизации отходов для получения информации о переработке или утилизации аккумулятора.

Обращение с аккумуляторами:

- при контакте с жидкостью из элемента аккумулятора промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью;
- взрывоопасно! никогда не бросайте аккумуляторы в огонь;
- не разбирайте, не открывайте и не ломайте аккумуляторы;
- используйте только входящее в комплект зарядное устройство;
- перед первым использованием аккумуляторы должны быть полностью заряжены;
- необходимо постоянно следить за правильной зарядкой;
- полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В таблице перечислены наиболее часто встречающиеся проблемы при использовании массажера. Если у вас возникли проблемы, не упомянутые в списке, попробуйте выполнить следующие действия:

- выключите массажер;
- держите массажер отключенным в течение 60 минут;
- включите питание.

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не работает.	Низкий уровень заряда устройства.	Зарядите устройство.
	Массажер только что завершил работу (прошло 15 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	Нажмите кнопку включения.
	Массажер перегружен. Такое может случиться, если на него встать или положить на тяжелый предмет.	Выключите массажер. Уберите нагрузку и запустите массажер повторно.
Массажер перегревается.	Было выполнено несколько циклов массажа по 15 минут. Слишком долго работает функция прогрева.	Выключите массажер и дайте ему остыть.

11. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Массажные ролики	2 пары
Функция прогрева	Да
Роликовый массаж	Да
Таймер	Автоотключение через 15 минут
Размер (Д*Ш*В), см	25x17x15
Вес нетто, кг	1,3
Вес брутто, кг	1,6
Размер упаковки, см	30x19x18
Напряжение питания	DC 5В 2А
Мощность, Вт	10
Батарея, мАч	2200 мАч 7,4В
Примерное время работы, мин.	90
Примерное время зарядки батареи, час	3,5-4

Виды массажа	Расслабляющий, разминание
Механизм массажа	Роликовый
Автопрограммы, шт	2
Кол-во роликов, шт.	4
Кол-во воздушных подушек, шт	-
Прогрев	Да
Вибромассаж	-
Пульт ДУ	-
Таймер	15 минут
Bluetooth	-
Размер (ДхШхВ), см	48x18x18
Вес нетто, кг	1
Вес брутто, кг	2
Размер упаковки, см	30x19x18
Напряжение питания	220В/5В 2А
Мощность, Вт	10

Производитель	Orlauf
Поставщик/Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orkauf.com

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



